

Phonak ComPilot II


Technische Daten



Der Phonak ComPilot II bietet dreifachen Komfort: drahtlose Anbindung, individuell programmierbare Fernsteuerung und gesprochene Nachrichten (VoiceAlerts). All diese Funktionen sind in einem einfachen und attraktiven Gerät untergebracht. Mit dem ComPilot II können drahtlose Phonak Hörgeräte mit bluetoothfähigen Telefonen, Fernsehern, MP3-Playern, Roger-/FM-Empfängern und vielem mehr verbunden werden.

Beschreibung

- 1 Haupttaste
- 2 Lautstärke erhöhen/reduzieren
- 3 Home-Taste
- 4 Verbinden-Taste
- 5 Ein-/Aus-Schalter
- 6 Mikrofone
- 7 Audioeingang (3.5 mm Klinke)
- 8 Eurostecker (Roger/FM/Audioeingang)
- 9 Ladebuchse (mini-USB)
- 10 Audioanzeige
- 11 Stromanzeige (Power)
- 12 Anschlüsse der Induktionsschlaufe
- 13 Induktionsschlaufe

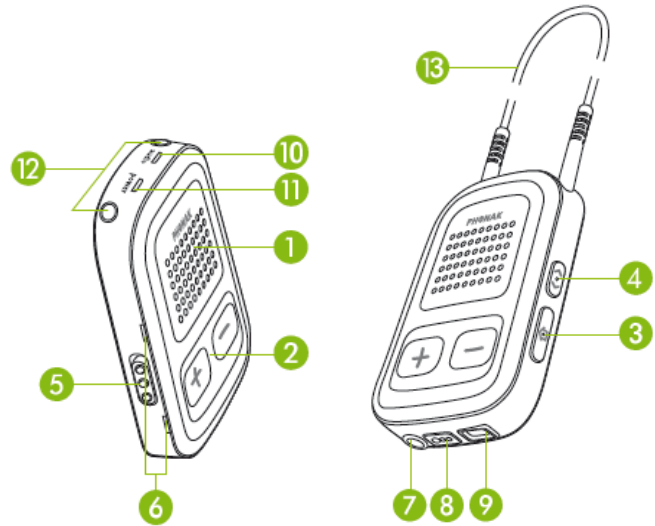

Funktionen

- Audioeingänge (Bluetooth, Kabel, Eurostecker)
- Bis zu 24 Stunden ununterbrochenes Streaming
- Binaurales Streaming von Audiosignalen in Stereo
- VoiceAlerts (Gesprochene Meldungen)
- Mit Phonak RemoteControl App kompatibel

Zubehör

- Audiokabel, 1,5 m
- Induktionsschlaufe kurz (50 cm)
- Externes Ansteckmikrofon "MC1"
- Phonak TVLink S / TVLink II
- 12V-Auto-Ladegerät, mini-USB

Allgemein

Maße (L x B x H):	7,2 x 4,9 x 1,4 cm
Gewicht:	46 g
Farbe:	Champagner/Schwarz
Betriebsbedingungen:	0 °C bis +40 °C (+32° bis +104° Fahrenheit) / < 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend)
Transport- und Lagerbedingungen:	-20 °C bis +60 °C (-4° bis +140° Fahrenheit) / < 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend)

Statusanzeige

Testton wird abgespielt	 Konstant violett
Bluetooth-Streaming	 Konstant blau
Streaming über Kabel/Eurostecker	 Konstant orange
Kopplungsmodus	 Blinkt schnell blau
Einschalten	 2 Sekunden grün
Ausschalten	 Blinkt rot und leuchtet dann konstant 2 Sekunden
Akku wird geladen	 Konstant rot
Akku voll und Ladegerät angeschlossen	 Konstant grün
<10% Akku-Restladung	 Blinkt 1x rot
<5% Akku-Restladung	 Blinkt 2x rot
Sperrung aktivieren/deaktivieren	 Blinkt dreifach rot (gesperrt)
	 Blinkt dreifach grün (entsperrt)



Strom- und Akkudaten

Batterie:	Lithium-Polymer, 3,7 V Gleichstrom
Ladezeit:	90 Minuten Die Ladezeit hängt vom anfänglichen Akkustatus ab. Volle Leistung wird nach 3 vollständigen Lade- und Entladezyklen erreicht.
Kapazität:	450 mAh (typ.)
Betriebszeit:	Bis zu 24 Stunden Bluetooth-Streaming 1 Woche im eingeschalteten Zustand, Bluetooth auf Standby Bis zu 24 Stunden Audio-Streaming über Kabel Bis zu 24 Stunden Streaming per Roger-/FM-System 2 Wochen Fernsteuerung
Lade-Eingang:	Typ: Gleichspannung, stabilisiert 5 V +/- 5 % Max. Stromstärke: 500 mA. Der Akku kann nicht überladen werden. Während des Ladevorgangs kann das Gerät warm werden. Wichtiger Hinweis: Es wird empfohlen, ausschließlich das Original-Ladegerät von Phonak zu verwenden.

Audiodaten

Unterstützter Audioeingang:	- Audiokabel (3,5 mm Klinke) - Bluetooth Audio (Stereo) - Bluetooth Telefon - Eurostecker
Audioqualität:	Stereo / 22 kHz Musterfrequenz
Audiobandbreite:	20 Hz – 10 kHz

Bluetooth

Unterstützte Bluetooth Profile:	- Headset Profile (HSP) - Handsfree Profile (HFP) - Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) - Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) - Phone Book Access Profile (PBAP)
Bluetooth-Bereich:	10 m (Klasse 2)
Bluetooth-Kompatibilität:	Bluetooth Version 4.1 + EDR / +LE
Max. Anzahl gekoppelter Geräte:	6
Maximale Anzahl simultan aktiver Profile:	- 3 A2DP - 2 HSP/HFP (in der Regel 2 Mobiltelefone und 1 TVLink oder RemoteMic)



Der Begriff Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., jegliche Verwendung dieser Marken durch Phonak erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind die ihrer jeweiligen Inhaber.

Funkdaten

	Induktions-schleifenantenne	Ferrit-Antenne
Typ:	Abnehmbar, induktiv	Integriert, induktiv
Betriebsfrequenz:	10,6 MHz	10,6 MHz
Belegte Bandbreite (99% Bandbreite):	582 kHz	556 kHz
Modulation:	8-DPSK	8-DPSK
Kanal:	Einkanalfunk	Einkanalfunk
Magnetfeldstärke bei 10 m:	-18 dBµA/m	-16 dBµA/m
Reichweite zu Hörgerät:	40 cm	bis zu 100 cm
Trageoption:	Am Hals	In der Hand
Anwendungsfall:	Streaming und Fernsteuerung	Nur Fernsteuerung

Angewandte Standards:

Europa

ETSI EN 300 330 (HiBAN)
ETSI EN 300 328 (Bluetooth)
EN/IEC 60601-1-2
EN 301489-1,-3,-17
EN/IEC 60601-1
EN 60950-1
EN 62479

USA

FCC 47 CFR Part 15.209 (HiBAN)
FCC 47 CFR Part 15.247 (Bluetooth)
FCC ID: KWC-COMPILOT2

Kanada

RSS-210 (Issue 8) Annex 1 (HiBAN)
RSS-210 (Issue 8) Annex 8 (Bluetooth)
IC: 2262A-COMPILOT2

Japan

EWPE (HiBAN), ARIB-T66 (Bluetooth)

Kompatibilität mit drahtlosen Hörgeräten von Phonak

Drahtlose Phonak Venture Hörgeräte erforderlich.

Vollständige Liste der kompatiblen Hörgeräte auf www.phonakpro.com unter: [Support] → [Kompatibilität] → Zubehör